


SELDIFLEX[®] SIMPLE LUMIERE avec prolongateur intégré

Stérile/Usage unique

Cathéter simple lumière avec extension intégrée, en polyuréthane, radio-opaque, introduit selon la méthode de Seldinger.

L'extension intégrée offre l'avantage de manipuler à distance du point de ponction pour de meilleures conditions d'asepsie.

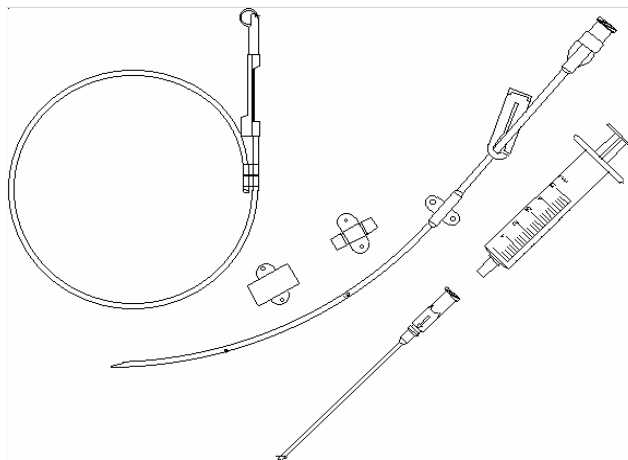

Les cathéters de voie veineuse centrale sont destinés à :

- L'administration de médicaments, la mesure de pression veineuse centrale, au remplissage vasculaire, la nutrition parentérale.

Nature des composants :

- Aiguille de ponction : acier inoxydable avec embase en polyméthylpentène,
- Cathéter : polyuréthane aliphatique, avec extension et embase en polyuréthane aromatique,
- Clamp : ABS,
- Guide métallique J, double flexibilité : acier inoxydable (possibilité guide droit gamme pédiatrique),
- Seringue luer lock, 5ml (présente uniquement dans les modèles adultes) : polypropylène,
- Emballage pelable pour les modèles pédiatriques,
- Emballage barquette, modèles adultes : PETG, operculé par un film Tyvek[®].

Mode de stérilisation : ETO – Péréemption 5 ans.

Précautions d'emploi : Lire notice d'instruction.

Etiquette amovible de traçabilité.

CE
0120

Division PLASTIMED
3, Rue Louis Armand
95130 Le Plessis-Bouchard

Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

PRODiMED

Pédiatrie											
Références		Cathéter PUR			VM	Débit	Guide Souple		Aiguille		
Guide droit	Guide J	Long en cm	Ø ext. mm	F	ml	ml/min	Ø ext. mm	Long mm	Ø ext. mm	G	Long mm
67242 07		4	0.7	2	0.10	14	0.48	215	0.70	22	19
	67242J07	4	0.7	2	0.10	14	0.48	215	0.70	22	19
67242 10		4	1.0	3	0.11	18	0.48	215	0.88	20	28
	67242J10	4	1.0	3	0.11	18	0.48	300	0.92	20	28
67243 07		6	0.7	2	0.10	10	0.48	215	0.70	22	19
	67243J07	6	0.7	2	0.10	10	0.48	300	0.70	22	19
67243 10		6	1.0	3	0.11	14	0.48	215	0.88	20	28
	67243J10	6	1.0	3	0.11	14	0.48	215	0.92	20	28
67243 13		6	1.3	4	0.12	42	0.61	215	1.07	19	41 + 55
	67243J13	6	1.3	4	0.12	42	0.61	300	1.12	19	38
67244 07		8	0.7	2	0.13	10	0.48	300	0.70	22	19
	67244J07	8	0.7	2	0.13	10	0.48	300	0.70	22	19
67244 10		8	1.0	3	0.14	13	0.48	300	0.88	20	28
	67244J10	8	1.0	3	0.14	13	0.48	300	0.88	20	28
67244 13		8	1.3	4	0.15	37	0.61	300	1.07	19	41 + 55
	67244J13	8	1.3	4	0.15	37	0.61	300	1.12	19	38
67246 07		11	0.7	2	0.15	8	0.48	300	0.70	22	19
	67246J07	11	0.7	2	0.15	8	0.48	300	0.70	22	19
67246 10		11	1.0	3	0.16	10	0.48	300	0.88	20	28
	67246J10	11	1.0	3	0.16	10	0.48	300	0.92	20	28
67246 13		11	1.3	4	0.17	30	0.61	300	1.07	19	41 + 55
	67246J13	11	1.3	4	0.17	30	0.61	300	1.07	19	41 + 55
67248 10		15	1.0	3	0.17	9	0.48	440	0.92	20	28
	67248J10	15	1.0	3	0.17	9	0.48	440	0.92	20	28
67248 13		15	1.3	4	0.20	30	0.61	440	1.07	19	41 + 55
	67248J13	15	1.3	4	0.20	30	0.61	440	1.07	19	41 + 55

Boîtes de 20 unités
Emballage pelable

Division PLASTIMED
3, Rue Louis Armand
95130 Le Plessis-Bouchard
Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

PRODiMED

Adulte										
Références	Cathéter PUR			VM	Débit	Guide Souple		Aiguille		
Guide J	Long en cm	Ø ext. mm	F	ml	ml/min	Ø ext. mm	Long mm	Ø ext. mm	G	Long mm
67261J17	15	1.7	5	0.27	60	0.89	450	1.24	18	70
67261J20	15	2.0	6	0.30	94	0.89	450	1.24	18	70
67262J17	20	1.7	5	0.35	57	0.89	450	1.24	18	70
67262J20	20	2.0	6	0.40	83	0.89	450	1.24	18	70

Boîtes de 5 unités
Emballage barquette

Adulte										
Seringue de Raulerson										
Références	Cathéter PUR			VM	Débit	Guide Souple		Aiguille		
Guide J	Long en cm	Ø ext. mm	F	ml	ml/min	Ø ext. mm	Long mm	Ø ext. mm	G	Long mm
67261RJ17	15	1.7	5	0.27	60	0.89	450	1.24	18	70
67261RJ20	15	2.0	6	0.30	94	0.89	450	1.42	17	75
67262RJ17	20	1.7	5	0.35	57	0.89	450	1.42	17	75
67262RJ20	20	2.0	6	0.40	83	0.89	450	1.24	18	70

Boîtes de 5 unités
Emballage barquette

ATTENTION :

1. Les références indiquées en caractère **gras** possèdent la nouvelle aiguille de ponction plus performante en terme de pénétration et le guide associé.

Les références indiquées en caractère non gras bénéficieront progressivement de cette modification, au fur et à mesure de la mise en œuvre.

Pour faciliter la compréhension nous avons de nouveau répertorié ces références dans un tableau annexe en page 4.

2. Les références correspondant à un cathéter de diamètre 2,0 mm comportent un dilateur 7F.

[Ce dilateur a été intégré dans le kit et il peut être utilisé lors de la pose du cathéter veineux.]

Annexe :

Tableau récapitulatif des références dont l'aiguille et/ou le guide est/sont en cours de modification.
(Les informations ci-dessous tiennent compte des changements à venir).

Pédiatrie											
Références		Cathéter PUR			VM	Débit	Guide Souple		Aiguille		
Guide droit	Guide J	Long en cm	Ø ext. mm	F	ml	ml/min	Ø ext. mm	Long mm	Ø ext. mm	G	Long mm
	67242J10	4	1.0	3	0.11	18	0.48	300	0.88	20	28
	67243J10	6	1.0	3	0.11	14	0.48	215	0.88	20	28
	67243J13	6	1.3	4	0.12	42	0.61	300	1.07	19	41 + 55
	67244J13	8	1.3	4	0.15	37	0.61	300	1.07	19	41 + 55
	67246J10	11	1.0	3	0.16	10	0.48	300	0.88	20	28
67248 10		15	1.0	3	0.17	9	0.48	440	0.88	20	28
	67248J10	15	1.0	3	0.17	9	0.48	440	0.88	20	28

Adulte											
Seringue de Raulerson											
Références		Cathéter PUR			VM	Débit	Guide Souple		Aiguille		
Guide J	Long en cm	Ø ext. mm	F	ml	ml/min	Ø ext. mm	Long mm	Ø ext. mm	G	Long mm	
67261RJ20	15	2.0	6	0.30	94	1.14	450	1.24	18	70	
67262RJ17	20	1.7	5	0.35	57	0.89	450	1.24	18	70	