

SELDICUFF PEDIATRIQUE®

Cathéter pédiatrique simple lumière tunnelisable longue durée avec manchon de polyester intradermique argenté
Stérile/Usage unique

Cathéter simple lumière en polyuréthane PC base radio opaque avec manchon de polyester et aiguille de tunnelisation sertie pour insertion selon la méthode de Seldinger.

Avantages :


► Un matériau conçu pour des implantations de longue durée (> 30 jours) : possède les propriétés suivantes :

- Résistance importante à l'attaque chimique des solvants et des excipients de substances antimitotiques,
- Grande résistance sous contrainte mécanique à l'attaque biologique des macrophages.

► Un manchon de polyester intradermique argenté :

- Fibrose orificielle, arrimage facilité,

Le passage sous cutané est facilité par une ½ olive de pénétration profilée.

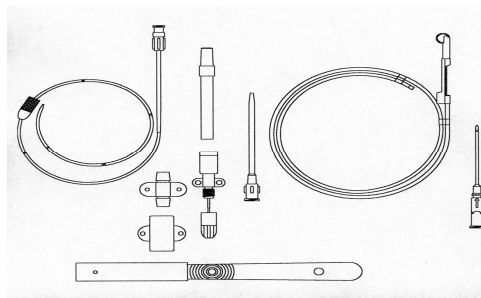

Nature des composants :

- Cathéter : polyuréthane aliphatique PC base avec manchon de polyester argenté + aiguille de tunnelisation sertie en acier inoxydable (L=8,5 cm),
- Obturateur d'aiguille de tunnelisation : polypropylène,
- Aiguille de ponction : acier inoxydable+embase en Polyméthylpentène (une aiguille de 28mm, une aiguille de 55mm),
- Guide métallique J : acier inoxydable,
- Embase écrou : raccord en polyméthylpentène + tube inox + écrou en polycarbonate,
- Ailette de fixation en SEBS + bloqueur polypropylène,
- Emballage barquette : PETG, operculé par un film Tyvek®.

Mode de stérilisation : ETO – Pérémpion 5 ans.

Précautions d'emploi : Lire notice d'instruction.

Etiquette amovible de traçabilité.

Insertion de 11 cm dans la veine centrale

Référence	Cathéter PUR				Guide souple		Aiguille		
	Long.cm	Ø ext.mm	F	Manchon	Ø ext.mm	Long.mm	Ø ext.mm	G	Long.mm
63343J13P11	30	1,3	4	19 cm ext.distale	0,52	600	0.88	20	28 55

Insertion de 8 cm dans la veine centrale

Référence	Cathéter PUR				Guide souple		Aiguille		
	Long.cm	Ø ext.mm	F	Manchon	Ø ext.mm	Long.mm	Ø ext.mm	G	Long.mm
63343J13P08	30	1,3	4	16 cm ext.distale	0,52	600	1,12	19	28 55

Emballage barquette - Boîte de 5 unités.



Division PLASTIMED
3, Rue Louis Armand
95130 Le Plessis-Bouchard

Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

PRODIMED

NB : Modification de la taille des aiguilles et des guides. Les modifications apparaissent en gras dans les tableaux ci-dessus (au fur et à mesure de la mise en œuvre). L'ensemble des modifications (faites et à venir) est indiqué ci-dessous, par référence.

Référence	Aiguille			Guide	
	Ø ext (mm)	Gauge	Long. (mm)	Ø ext (mm)	Long. (mm)
63343J13P08	0.88	20	28+55	0.52	600
63343J13P11	0.88	20	28+55	0.52	600