


# PLEURODRAIN<sup>®</sup>

## Cathéter de drainage pleural

Stérile/Usage unique

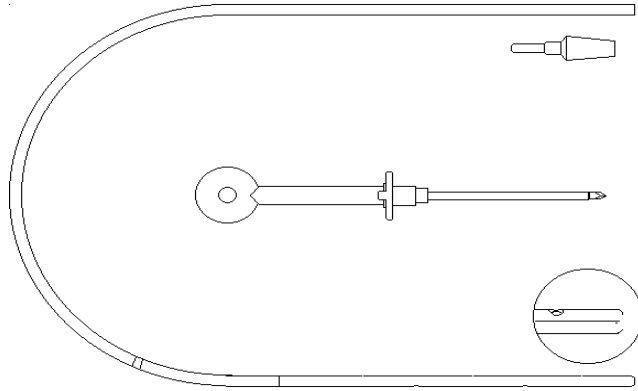

Cathéter de drainage thoracique permettant :

- d'évacuer les épanchements :
  - Liquidiens : hémithorax, pleurésie purulente ou sérofibrineuse,
  - Gazeux : pneumothorax,
- de restaurer la pression négative dans l'espace pleural et d'assurer la réexpansion d'un poumon rétracté.

#### Nature des composants :

- Introducteur 2 pièces (trépan et gaine) : acier inoxydable,
- Drain : PVC souple radio-opaque, perforé sur 8 cm,
- Raccord conique : 6-13 mm : ABS,
- Emballage rigide.

**Mode de stérilisation :** ETO – Péréemption 5 ans.

#### Précautions d'emploi :

Classiquement, un pneumothorax se draine par le 2<sup>ème</sup> ou 3<sup>ème</sup> espace intercostal sur la ligne médio-claviculaire et un épanchement liquidien au niveau du 6<sup>ème</sup> ou 7<sup>ème</sup> espace intercostal sur la ligne axillaire moyenne.

Parfois, les causes locales (traumatisme, cicatrice...), le cloisonnement des épanchements peut faire choisir un autre point de drainage.

Références	Drain		
	φ ext.mm	Long .cm	Long .perforation
<b>Adulte</b> 5415 45	4.5	50	8 cm

Boîte de 20 unités.



Division PLASTIMED  
3, Rue Louis Armand  
95130 Le Plessis-Bouchard  
Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

# PRODiMED