

SELDIFLEX[®] Longue Durée


Cathéter simple lumière tunnelisable

Stérile/Usage unique

Cathéter simple lumière en polyuréthane PC base, radio-opaque, avec aiguille de tunnelisation sertie, pour insertion selon la méthode de Seldinger.

Le polyuréthane aliphatique PC base, conçu pour des implantations de longue durée (> 30 jours) possède les propriétés suivantes :

- Résistance importante à l'attaque chimique des solvants et des excipients de substances antimicrobiennes,
- Grande résistance sous contrainte mécanique à l'attaque biologique des macrophages.

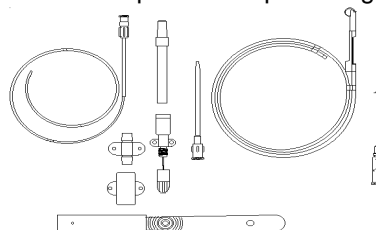

La technique reconnue de cette tunnelisation offre les avantages suivants :

- Diminution des risques d'infection sur cathéter,
- Sécurité d'un pansement occlusif,
- Améliore le confort du patient.

Cathéter préconisé pour chimiothérapie ou nutrition à domicile.

Nature des composants :

- Cathéter : polyuréthane aliphatique PC base ORX avec aiguille de tunnelisation sertie en acier inoxydable (L=10.5 cm),
- Mandrin obturateur d'aiguille de tunnelisation : polypropylène,
- Aiguille de ponction : acier inoxydable avec embase en polyméthylpentène,
- Guide métallique droit ou J : acier inoxydable,
- Embase écrou : raccord aiguille mousse en polyméthylpentène + tube inox + écrou en polycarbonate,
- Ailettes de fixation : SEBS + bloqueur polypropylène,
- Dilatateur : polyéthylène haute densité (L=10cm),
- Bistouri,
- Emballage barquette : PETG, operculé par un film Tyvek®.

Mode de stérilisation : ETO – Péréemption 5 ans.

Précautions d'emploi : lire la notice d'instruction.

Etiquette amovible de traçabilité.

Références		Cathéter PUR				Guide souple		Aiguille		
Guide droit	Guide J	Long. cm	φ ext.mm	F	Débit ml/min	φ ext.mm	Long. mm	φ ext.mm	G	Long.mm
	63244J13	40	1.3	4		0.52	600	0.92	20	28+55.
63244 20	63244J20	40	2	6	72	0.97	700	1.42	17	75
63246 20	63246J20	60	2	6	60	0.97	1000	1.42	17	75

Boîte de 5 unités - Débit mesurés selon la norme ISO 10555-3.



Division PLASTIMED

3, Rue Louis Armand

95130 Le Plessis-Bouchard

Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

PRODIMED

NB : Modification de la taille des aiguilles et des guides. Les modifications apparaissent en gras dans les tableaux ci-dessus (au fur et à mesure de la mise en œuvre). L'ensemble des modifications (faites et à venir) est indiqué ci-dessous, par référence.

Référence		Aiguille			Guide	
		Ø ext (mm)	Gauge	Long. (mm)	Ø ext (mm)	Long. (mm)
	63244J13	0.88	20	28+55	0.52	600
63244.20	63244J20	1.24	18	70	0.89	700
63246.20	63246J20	1.24	18	70	0.89	1000

Division PLASTIMED
3, Rue Louis Armand
95130 Le Plessis-Bouchard
Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

PRODiMED